


# CHROMagar O157 TAM における判定

## 食品検査、糞便検査 等に強い味方！


発育支持能が従来より向上し、形成されたコロニーの色調鑑別が容易です。

*E. coli* O157は**藤色**、O157以外の*E. coli*および大腸菌群は**青色**、  
硫化水素産生性の*Salmonella*属や*Citrobacter*属は**黒色**、  
IPA反応陽性の*Proteus*属は**茶褐色**のコロニーを形成します。

製品コード	製品名	包装
72023	クロモアガー O157 TAM	5L用
72024	クロモアガー O157 TAM(生培地)	20枚
72018	クロモアガー O157 TAM(生培地)	100枚

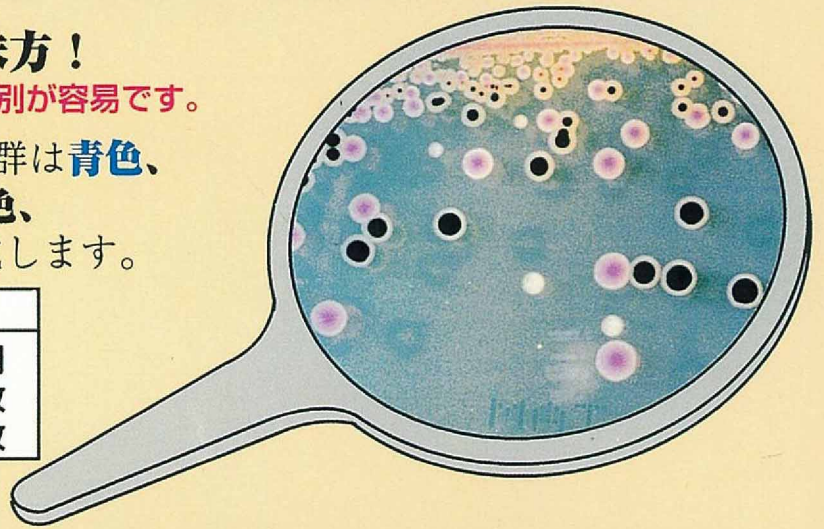

本培地は**特殊酵素基質**、**硫化水素産生能**および**IPA反応**により、数種の腸内細菌の菌種または菌属の色調鑑別が可能です。

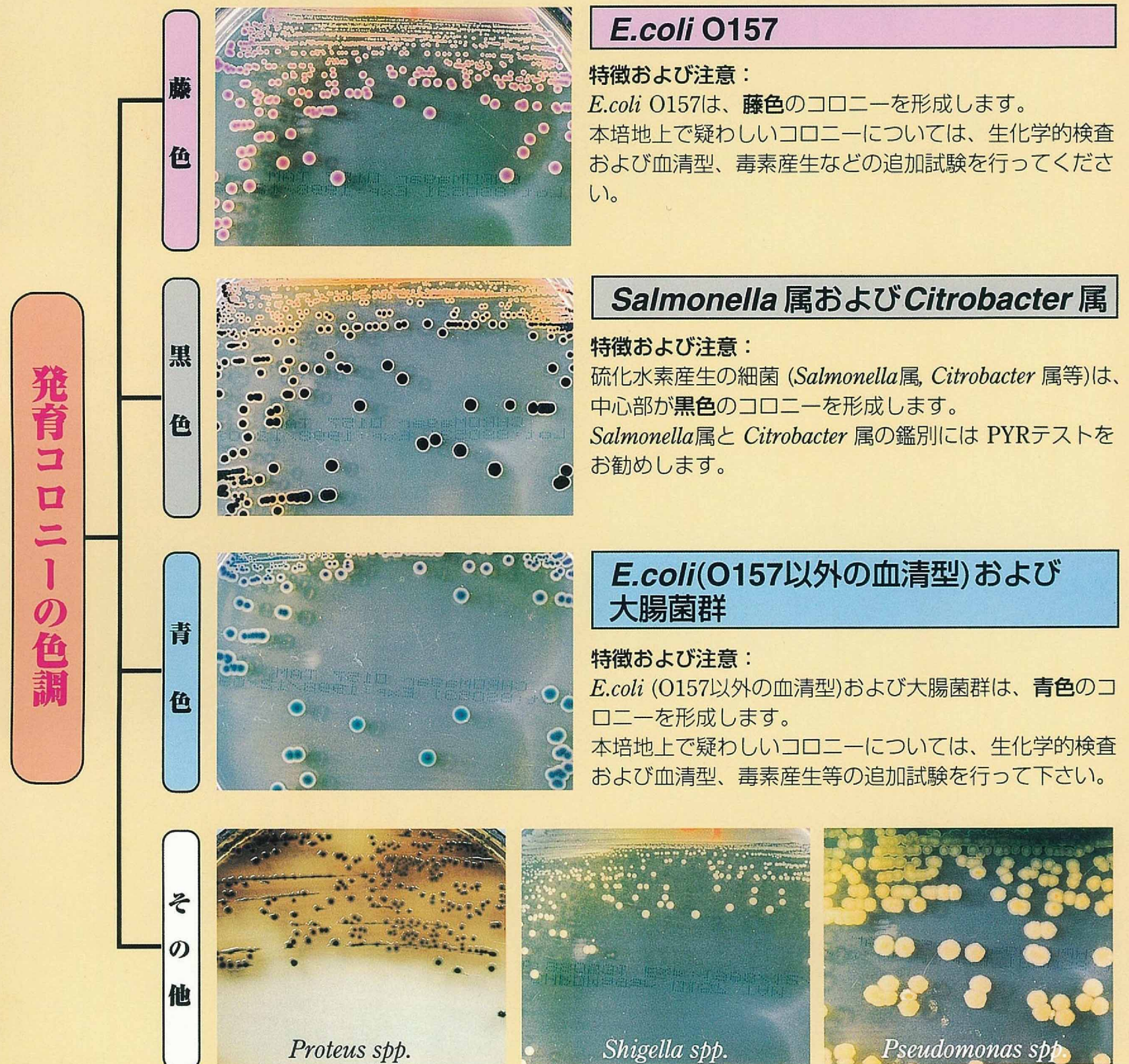

IPA反応陽性菌：本培地では *Proteus* spp. のスウォーミングを抑えられるのが特徴です。



**関東化学株式会社**

本社 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 3-11-5 03(3667)8061  
 大阪 〒541-0048 大阪市中央区瓦町 2-5-1 06(6222)3709  
 福岡 〒812-0007 福岡市博多区東比恵 2-22-3 092(414)9361  
 ・e-mail:diag-info@gms.kanto.co.jp ・http://www.kanto.co.jp